

# Invacare® | **Birdie® y Birdie® Compact**



## Donde transporte y comodidad van de la mano

Las grúas **Invacare Birdie** e **Invacare Birdie Compact** ofrecen elevaciones y transferencias más cómodas desde la cama, silla o incluso desde el suelo. Las grúas están diseñadas para asegurar su plegado, montaje e incluso desmontaje en dos partes, con facilidad y sin necesidad de herramientas.



Invacare **Birdie**

Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®



### Toda la comodidad para el usuario

Maximiza el espacio para el usuario incluso cuando la grúa está en su posición más alta, esto permite elevaciones y transferencias confortables. La percha gira 360° para mayor comodidad tanto del usuario como del cuidador, al utilizar la grúa para realizar movimientos. La optimización del espacio genera un alto nivel de comodidad, ya que el paciente no estará cerca del motor, por lo que existe menor riesgo de lastimar las rodillas del usuario.

### Fácil de manejar : sencilla de plegar, montar y desmontar sin herramientas

El manejo de la grúa es tan sencillo y fácil que no necesita ninguna herramienta para su plegado y montaje. La grúa ocupa un espacio mínimo cuando se almacena y es fácil transportarla. Si se requiere, el mástil y el brazo pueden ser fácilmente retirados de la base (no se requieren herramientas).

### Certificados que aseguran la máxima calidad

Para mayor seguridad, las grúas tienen un sistema de doble bloqueo, uno al desplegar el mástil y unirlo con la base y otro mediante el pasador magnetizado, todo esto para minimizar el riesgo de accidentes. Las grúas están marcadas CE bajo la Directiva para


Equipos Médicos 93/42/ECC. Para asegurar que las grúas cumplen con la EN ISO 10535 (normativa estándar europea para grúas) las grúas han sido rigurosamente probadas por Invacare y el Instituto Alemán TÜV (centro de acreditación externo).

## Características y opciones



#### Brazo largo - comodidad para el usuario

El usuario puede fácilmente ser girado y posicionado, sin riesgo de lastimar sus rodillas.

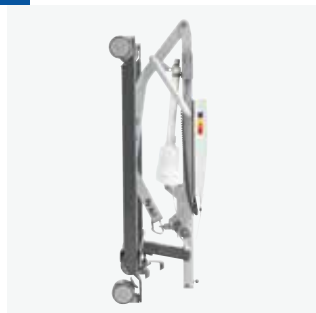

#### Fácil de plegar y desmontar

Facilidad para su transporte y almacenaje. No son necesarias herramientas para el plegado, montaje o desmontaje.



#### Sistema de bloqueo con seguridad

Seguridad máxima con pasador magnético para evitar riesgos.



#### Parada y descenso de emergencia y cargador integrado

Para cargar la grúa es necesario únicamente conectar y enchufar el cargador.

**Características y opciones**



Invacare **Birdie Compact**



**Colocación de la percha**  
Facilidad para colocar o cambiar la percha.



**Mosquetón de seguridad**  
Posición correcta y segura de la percha.



**Apertura Manual**  
Únicamente con el apoyo del pie en el pedal se ajusta la apertura/cierre de las patas.



**Báscula**  
Si es necesario pesar al paciente, también está disponible una báscula que se coloca entre el brazo y la percha.



**Mando imantado Linak HB30**  
Más sólido, mejor diseño y con revestimiento antideslizante.



**Más ergonómico**  
Fácil acceso y utilización durante las transferencias.



**Ruedas**  
Diámetro de 100mm para mejor maniobrabilidad con freno largo.



**Perchas 2 puntos**  
Como opción disponibles en anchos de 45cm y de 55cm.








**Percha 4 puntos**  
Como opción disponibles en anchos de 45cm y de 55cm.








**Amplia gama de eslingas**  
Diferentes modelos y tallas de arneses para mayor comodidad y ajuste del paciente y sus necesidades.



## Datos técnicos

					
<b>Birdie</b>	1240 mm	675 mm	42 kg	480 - 1700 mm	115 mm
<b>Birdie Compact</b>	1090 mm	550 mm	36 kg	530 - 1600 mm	115 mm

					
<b>Birdie</b>	1040mm*	180 kg	40 ciclos	2,9 Ah	1400 mm
<b>Birdie Compact</b>	890 mm*	150 kg	40 ciclos	2,9 Ah	1070 mm

Todas las medidas han sido tomadas para percha de dos puntos y ruedas de 100mm.

\* Medida tomada en apertura máxima de centro a centro de rueda.

## Color del chasis



Gris claro /  
gris oscuro



Captura este código y visualiza el sistema de plegado de la **Invacare Birdie!**



Captura este código y visualiza cómo realizar una transferencia segura con la **Invacare Birdie!**